



FLUXMEDICARE® Protect | Housses de protection pour textile lumineux

FLUXMEDICARE® Protect | Protective covers for light-emitting textile

FLUXMEDICARE® Protect | Schutzhüllen für lichtemittierende Textilien

[www.fluxmedicare.fr](http://www.fluxmedicare.fr)



**Manuel de pose** ..... p. 3 à 9



**Installation manual** ..... p. 10 to 16



**Installationshandbuch** ..... p. 17 bis 23

[www.fluxmedicare.fr](http://www.fluxmedicare.fr)



# fluxmedicare® protect

## Housses de protection FLUXMEDICARE® PROTECT

Manuel de pose des housses de protection FLUXMEDICARE® Protect



\* Photo non contractuelle

MDB TEXINOV®  
56 route de Ferrossière  
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR  
France

Tél. : +33 (0)4 74 94 44 75  
Email : [medical@texinov.fr](mailto:medical@texinov.fr)

## Sommaire

---

1.	Composition .....	5
2.	Formats de housses de protection.....	5
3.	Pose des housses de protection pour textiles lumineux FLUXMEDICARE® .....	6
3.1.	Housse de protection Fluxmedicare® Protect 1 pour <b>textile lumineux T1</b> .....	6
3.2.	Housse de protection Fluxmedicare® Protect 2 pour <b>textile lumineux T2</b> .....	7
3.3.	Housse de protection FLUXMEDICARE® Protect 3 pour <b>textile lumineux T3</b> .....	8
3.4.	Housse de protection FLUXMEDICARE® Protect 4 et 6 pour <b>textile lumineux T4 et T6</b> .....	9

## Avant-propos

---

Les housses de protection **FLUXMEDICARE® Protect** sont des accessoires exclusivement créés pour la protection des textiles lumineux contre les éventuelles coulures ou salissures qui pourraient survenir pendant le traitement avec le système **FLUXMEDICARE®** (se conformer à la notice d'utilisation du dispositif médical **FLUXMEDICARE®**).

Réalisées en non-tissé avec film protecteur, elles optimisent la propreté du textile lumineux **FLUXMEDICARE®** et offrent une hygiène renforcée lors du port du textile lumineux.

Spécialement conçues pour être utilisées avec les différents modèles de textiles lumineux **FLUXMEDICARE®**, les housses de protection **FLUXMEDICARE® Protect** sont à usage unique et doivent être jetées après chaque utilisation.



Les housses de protection **FLUXMEDICARE® Protect** sont des dispositifs médicaux de classe I marqués CE selon le Règlement (UE) 2017/745. Les indications, contre-indications, groupe de patients, utilisateur, lieu et environnement d'utilisation, précautions et avertissements sont les mêmes que ceux de **FLUXMEDICARE®** (se conformer à la notice d'utilisation du dispositif médical **FLUXMEDICARE®**).

## 1. Composition

Les housses de protection **FLUXMEDICARE® Protect** sont réalisées en non-tissé avec film protecteur intérieur polyéthylène PE / polypropylène PP, 28 g/m<sup>2</sup>. Label Oeko-Tex® 100.

## 2. Formats de housses de protection

Les housses de protection **FLUXMEDICARE® Protect** existent en plusieurs formats, adaptés aux différents modèles de textiles lumineux du dispositif médical **FLUXMEDICARE®**.

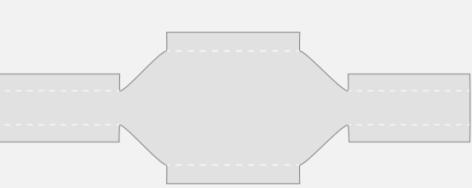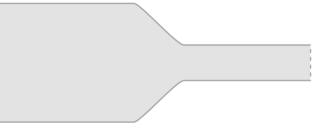Référence	Description	Photo TEXTLIGHT	Usage	Housse FLUXMEDICARE® Protect *
FMP01	Housse de protection en non tissé pour textile lumineux TEXTLIGHT1 - Taille unique		Usage unique	
FMP02	Housse de protection en non tissé pour textile lumineux TEXTLIGHT2 - Taille unique		Usage unique	
FMP03	Housse de protection en non tissé pour textile lumineux TEXTLIGHT3 - Taille unique		Usage unique	
FMP04	Housse de protection en non tissé pour textile lumineux TEXTLIGHT4 - Taille unique		Usage unique	
FMP06	Housse de protection en non tissé pour textile lumineux TEXTLIGHT6 - Taille unique		Usage unique	

\* Illustrations non contractuelles

### 3. Pose des housses de protection pour textiles lumineux FLUXMEDICARE®

#### 3.1. Housse de protection Fluxmedicare® Protect 1 pour textile lumineux T1

La housse de protection **FLUXMEDICARE® Protect** - réf **FMP01** - est spécialement conçue pour le textile lumineux **FLUXMEDICARE® modèle T1 (Textlight1)**.

Textile lumineux Textlight1 (T1)



(dessus – face extérieure avec scratches)



(dessous – face intérieure avec fibres optiques)

Housse de protection “FLUXMEDICARE® Protect” FMP01


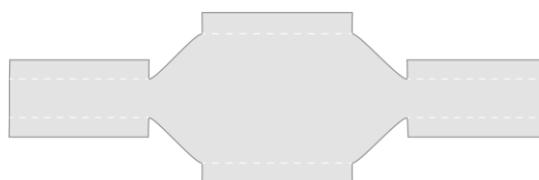


Schéma non contractuel

##### ETAPE 1 : partie centrale de la housse de protection



- 1) Poser la housse de protection à plat, sur une surface plane, face plastifiée lisse vers l'extérieur.
- 2) Disposer sur la housse le textile lumineux (modèle Textlight 1), face tissu bleu marine avec scratches vers l'extérieur. La bande lumineuse blanche à fibres optiques doit se trouver en-dessous, non visible, en contact avec la housse de protection.

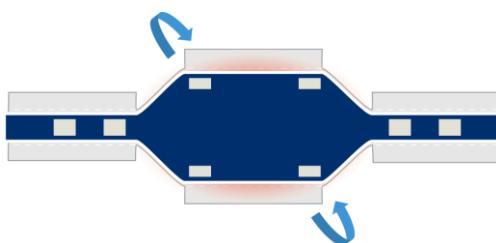

- 3) Refermer les rabats de la partie centrale de la housse sur le textile, en les fixant sur les scratches du textile. Ajuster si nécessaire.

##### ETAPE 2 : extrémités latérales



Refermer les rabats de la housse sur chaque extrémité latérale du textile, en les fixant sur les scratches du textile. Ajuster.

##### FIN DE LA POSE



Le textile lumineux Textlight1 avec housse FLUXMEDICARE® Protect ref FMP01 est prêt à l'emploi.


(se reporter à la notice d'utilisation du dispositif médical FLUXMEDICARE®).

À usage unique, la housse de protection doit être jetée après chaque utilisation.


### 3.2. Housse de protection Fluxmedicare® Protect 2 pour textile lumineux T2

La housse de protection **FLUXMEDICARE® Protect** - réf FMP02 - est spécialement conçue pour le textile lumineux **FLUXMEDICARE® modèle T2 (Textlight2)**.

**Textile lumineux Textlight2 (T2)**

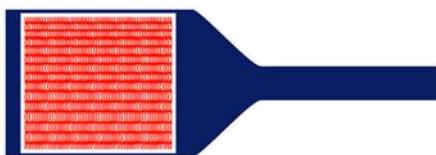

**Housse de protection “FLUXMEDICARE® Protect” FMP02**

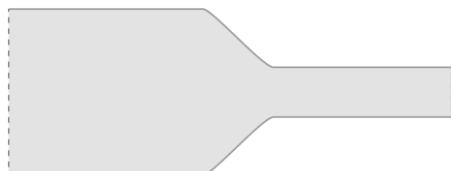

*Schéma non contractuel*

**ETAPE 1 : Enfilage de la housse de protection**



**FIN DE LA POSE**



Le textile lumineux Textlight2 avec housse **FLUXMEDICARE® Protect** réf FMP02 est prêt à l'emploi.

*(se reporter à la notice d'utilisation du dispositif médical FLUXMEDICARE®).*

À usage unique, la housse de protection doit être jetée après chaque utilisation.

### 3.3. Housse de protection FLUXMEDICARE® Protect 3 pour textile lumineux T3

La housse de protection **FLUXMEDICARE® Protect** – réf FMP03 - est spécialement conçue pour le textile lumineux **FLUXMEDICARE® modèle T3 (Textlight3)**.

**Textile lumineux Textlight3 (T3)**




**Housse de protection “FLUXMEDICARE® Protect” FMP03**



*Schéma non contractuel*

**ETAPE 1 : Enfilage de la housse de protection**

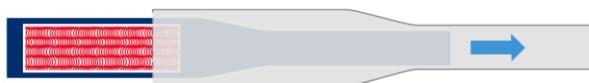

**FIN DE LA POSE**



Le textile lumineux Textlight3 avec housse **FLUXMEDICARE® Protect** réf FMP03 est prêt à l'emploi.

(se reporter à la notice d'utilisation du dispositif médical **FLUXMEDICARE®**).

À usage unique, la housse de protection doit être jetée après chaque utilisation.

### 3.4. Housse de protection FLUXMEDICARE® Protect 4 et 6 pour textile lumineux T4 et T6

La housse de protection **FLUXMEDICARE® Protect** - réf FMP04 - est spécialement conçue pour le textile lumineux **FLUXMEDICARE® modèle T4 (Textlight4)** et la housse de protection **FLUXMEDICARE® Protect** - réf FMP06 - est spécialement conçue pour le textile lumineux **FLUXMEDICARE® modèle T6 (Textlight6)**.

Textile lumineux Textlight4 (T4)



(dessus – face extérieure avec scratchs)

Textile lumineux Textlight6 (T6)



(dessus – face extérieure avec scratchs)



(dessous – face intérieure avec fibres optiques)

Housse de protection  
“FLUXMEDICARE® Protect” FMP04 ou FMP06

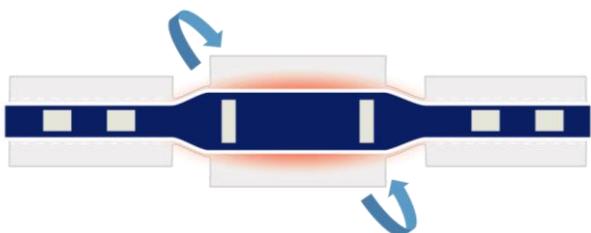


Schéma non contractuel

#### ETAPE 1 : partie centrale de la housse de protection




- 1) Poser la housse de protection à plat, sur une surface plane, face plastifiée lisse vers l'extérieur.
- 2) Disposer sur la housse le textile lumineux (modèle Textlight4 ou Textlight6), face tissu bleu marine avec scratchs vers l'extérieur. La bande lumineuse blanche à fibres optiques doit se trouver en-dessous, non visible, en contact avec la housse de protection.



- 3) Refermer les rabats de la partie centrale de la housse sur le textile, en les fixant sur les scratchs du textile. Ajuster si nécessaire.

#### ETAPE 2 : extrémités latérales

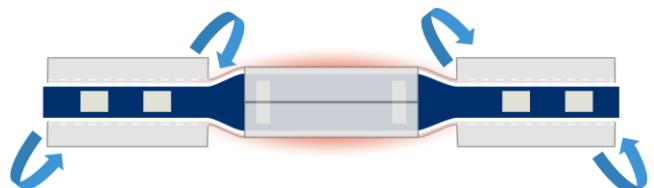

Refermer les rabats de la housse sur chaque extrémité latérale du textile, en les fixant sur les scratchs du textile. Ajuster.

#### FIN DE LA POSE



Le textile lumineux Textlight4 ou Textlight6 avec housse FLUXMEDICARE® Protect réf FMP04 ou réf FMP06 est prêt à l'emploi.

(se reporter à la notice d'utilisation du dispositif médical FLUXMEDICARE®).

À usage unique, la housse de protection doit être jetée après chaque utilisation.



# fluxmedicare<sup>®</sup> protect

## PROTECTIVE « FLUXMEDICARE<sup>®</sup> PROTECT » COVERS

Installation manual of protective « FLUXMEDICARE<sup>®</sup> Protect » cover



\* Non contractual illustrations

MDB TEXINOV<sup>®</sup>  
56 route de Ferrossière  
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR  
France

Tel. : +33 (0)4 74 94 44 75  
Email : [medical@texinov.fr](mailto:medical@texinov.fr)

EN

## Table of contents

---

1.	Composition .....	12
2.	Sizes of the protective cover.....	12
3.	Set up of the protective covers on the FLUXMEDICARE® light-emitting textile .....	13
3.1.	Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 1 for <b>light-emitting textile T1</b> .....	13
3.2.	Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 2 for <b>light-emitting textile T2</b> .....	14
3.3.	Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 3 for <b>light-emitting textile T3</b> .....	15
3.4.	Protective « FLUXMEDICARE® Protect » covers 4 & 6 for <b>light-emitting textiles T4 &amp; T6</b> ....	16

## Foreword

---

The **FLUXMEDICARE® Protect** covers are accessories exclusively designed for the protection of the light-emitting textiles against leaks or dirt that could occur during the treatment with the FLUXMEDICARE® system (please refer to the User Manual of the **FLUXMEDICARE®** medical device).

These nonwoven laminated covers keep the light-emitting textile clean and offer a better hygiene during the use.

The **FLUXMEDICARE® Protect** covers are especially designed for a single use with the different models of the **FLUXMEDICARE®** light emitting textiles. They have to be thrown away after each use.




The **FLUXMEDICARE® Protect** covers are a CE marked Class I medical devices in accordance with Regulation (EU) 2017/745. Therapeutic indications, contraindication, target of patients, users, location and environment of use, precautions and warnings are the same that the ones for the **FLUXMEDICARE®** system (refer to the user manual of the **FLUXMEDICARE®** medical device).

## 1. Composition

The **FLUXMEDICARE® Protect** cover are made of 28 gr/sqm polypropylen PP nonwoven with a one-side laminated polyethylen PE film. Oeko-Tex® 100 certified.

## 2. Sizes of the protective cover

The **FLUXMEDICARE® Protect** covers are available in several sizes to fit the different light emitting textiles models of the **FLUXMEDICARE®** medical device.

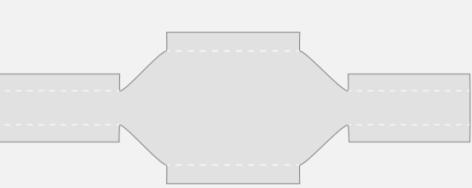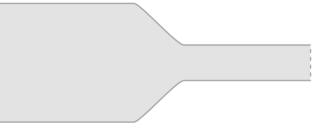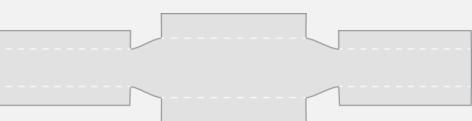
Reference	Description	TEXTLIGHT picture	Use	FLUXMEDICARE® Protect picture*
FMP01	Non-woven protective cover for light-emitting textile TEXTLIGHT1 – Single size		Single use	
FMP02	Non-woven protective cover for light-emitting textile TEXTLIGHT2 – Single size		Single use	
FMP03	Non-woven protective cover for light-emitting textile TEXTLIGHT3 – Single size		Single use	
FMP04	Non-woven protective cover for light-emitting textile TEXTLIGHT4 – Single size		Single use	
FMP06	Non-woven protective cover for light-emitting textile TEXTLIGHT6 – Single size		Single use	

\* Non contractual illustrations


### 3. Set up of the protective covers on the FLUXMEDICARE® light-emitting textile

#### 3.1. Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 1 for light-emitting textile T1


The protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover - ref FMP01 – is especially designed for the **FLUXMEDICARE® T1 light-emitting textile (Textlight1)**.

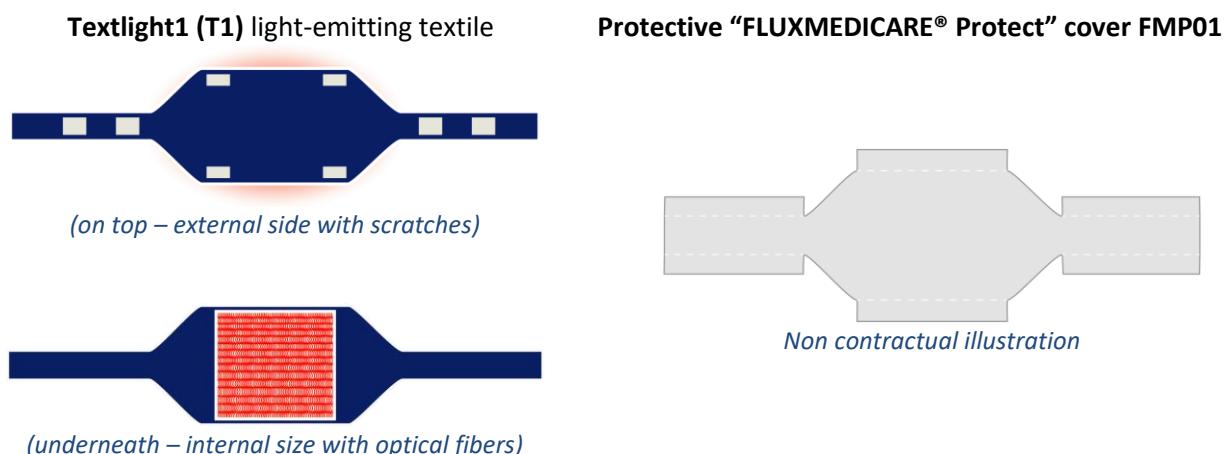

##### STEP 1 : central part of the protective cover

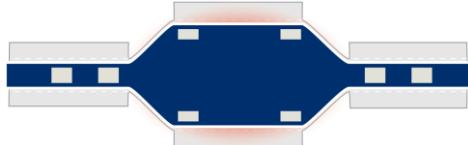

- 1) Lay flat the protective cover on a plane surface, smooth plastic side outward.
- 2) Put the light emitting textile (Textlight 1 model) on the cover. The navy fabric side with scratches must be put on the outside. The white light emitting band with optical fibers must be put underneath, not visible, and must be in close contact with the cover.

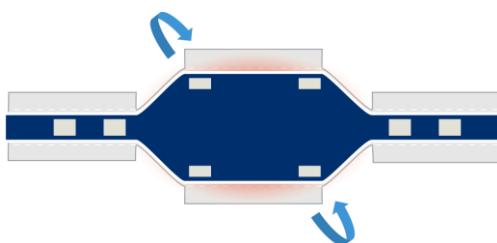

- 3) Close the flaps of the central part of the cover on the textile. Secure with the scratches. Adjust if necessary.

##### STEP 2 : lateral parts



Close the flaps of the lateral parts of the cover on each end of the textile. Secure with the scratches. Adjust.

##### END OF SET-UP



The Textlight1 light emitting textile with the FLUXMEDICARE® Protect cover ref FMP01 is now ready for use.

*(Please refer to the user manual of the FLUXMEDICARE® medical device).*

The protective cover is for single use; it must be thrown away after each use.


### **3.2. Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 2 for light-emitting textile T2**

The protective « **FLUXMEDICARE® Protect** » cover - ref **FMP02** – is especially designed for the **FLUXMEDICARE® T2 light-emitting textile (Textlight2)**.

**Textlight2 (T2) light-emitting textile**



**Protective “FLUXMEDICARE® Protect” cover FMP02**

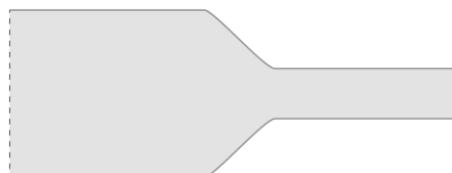

*Non contractual illustration*

**STEP 1 : Put on the protective cover**



**END OF SET-UP**



The Textlight2 light emitting textile with **FLUXMEDICARE® Protect** cover ref **FMP02** is now ready for use.

*(Please refer to the user manual of the **FLUXMEDICARE®** medical device).*

The protective cover is for single use; it must be thrown away after each use.

### 3.3. Protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover 3 for light-emitting textile T3

The protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover - ref FMP03 – is especially designed for the **FLUXMEDICARE® T3 light-emitting textile (Textlight3)**.

**Textlight3 (T3) light-emitting textile**



**Protective “FLUXMEDICARE® Protect” cover FMP03**



*Non contractual illustration*

**STEP 1 : Put on the protective cover**



**END OF SET-UP**



The Textlight3 light emitting textile with FLUXMEDICARE® Protect cover ref FMP03 is now ready for use.

(Please refer to the user manual of the FLUXMEDICARE® medical device).

The protective cover is for single use; it must be thrown away after each use.

### 3.4. Protective « FLUXMEDICARE® Protect » covers 4 & 6 for light-emitting textiles T4 & T6

The protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover - ref FMP04 – is especially designed for the FLUXMEDICARE® T4 light-emitting textile (Textlight4) and the protective « FLUXMEDICARE® Protect » cover - ref FMP06 – is especially designed for the FLUXMEDICARE® T6 light-emitting textile (Textlight6).

**Textlight4 (T4) light-emitting textile**



(on top – external side with scratches)

**Textlight6 (T6) light-emitting textile**



(on top – external side with scratches)



(underneath – internal side with optical fibers)

**Protective “FLUXMEDICARE® Protect” cover**

**FMP04 or FMP06**




*Non contractual illustration*

**STEP 1 : central part of the protective cover**




- 1) Lay flat the protective cover on a plane surface, smooth plastic side outward
- 2) Put the light emitting textile (Textlight4 model) on the cover. The navy fabric side with scratches must be put on the outside. The white light emitting band with optical fibers must be put underneath, not visible, and must be in close contact with the cover.

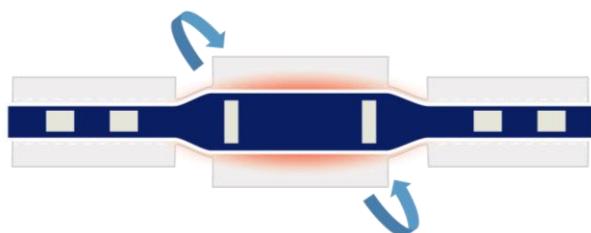


- 3) Close the flaps of the central part of the cover on the textile. Secure with the scratches. Adjust if necessary.

**STEP 2 : lateral parts**

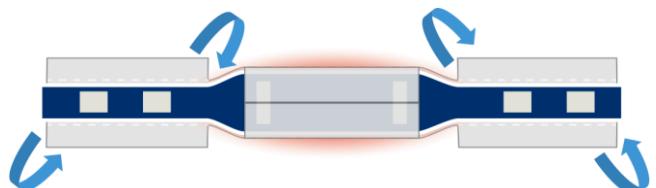

Close the flaps of the lateral parts of the cover on each end of the textile. Secure with the scratches. Adjust.

**END OF SET-UP**

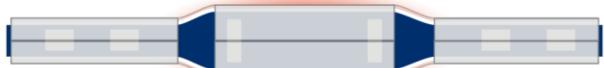

The Textlight4 or Textlight6 light emitting textile with FLUXMEDICARE® Protect cover ref FMP04 or ref FMP06 is now ready for use.

*(Please refer to the user manual of the FLUXMEDICARE® medical device).*

The protective cover is for single use; it must be thrown away after each use.

# fluxmedicare<sup>®</sup> protect

## Schutzhüllen FLUXMEDICARE<sup>®</sup> PROTECT

Bedienungsanleitung für Schutzhüllen FLUXMEDICARE<sup>®</sup> Protect



\* Abbildungen ohne Gewähr

MDB TEXINOV<sup>®</sup>  
56 route de Ferrossière  
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR  
Frankreich

Tel. : +33 (0)4 74 94 44 75  
E-mail : [medical@texinov.fr](mailto:medical@texinov.fr)

DE

# Übersicht

---

1.	Zusammensetzung .....	19
2.	Formate der Schutzhüllen.....	19
3.	Befestigung der Schutzhüllen für lichtemittierende FLUXMEDICARE® Textilien.....	20
3.1.	Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 1 für <b>lichtemittierendes Textil T1</b> .....	20
3.2.	Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 2 für <b>lichtemittierendes Textil T2</b> .....	21
3.3.	Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 3 für <b>lichtemittierendes Textil T3</b> .....	22
3.4.	Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 4 und 6 für <b>lichtemittierende Textilien T4 und T6</b> ...	23

## Vorbemerkung

---

Die Schutzhüllen **FLUXMEDICARE® Protect** sind Zubehörteile, die exklusiv für den Schutz der lichtemittierenden Textilien vor möglichen Läufern und Verschmutzungen, die während der Behandlung mit dem System **FLUXMEDICARE®** auftreten könnten, entwickelt wurden (dazu die Bedienungsanleitung des Medizineräts **FLUXMEDICARE®** beachten).

Sie sind aus Vliesstoff mit einer Schutzfolie und optimieren die Reinheit der lichtemittierenden **FLUXMEDICARE®** Textilien. Sie bieten größere Hygiene beim Tragen der lichtemittierenden Textilien.

Die Schutzhüllen **FLUXMEDICARE® Protect** wurden speziell für die Benützung mit den lichtemittierenden **FLUXMEDICARE® Textilien** entwickelt. Sie **sind für den Einmalgebrauch bestimmt und müssen nach jeder Benützung entsorgt werden.**


Die Schutzhüllen **FLUXMEDICARE® Protect** sind Medizineräte der Klasse I, die der CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 entsprechen. Die Indikationen, Kontraindikationen, Patientengruppe, Benutzer, Gebrauchsort und -umgebung, Vorsichtsmaßnahmen sowie Warnungen sind die gleichen wie die von **FLUXMEDICARE®** (die Gebrauchsanweisung des Medizineräts **FLUXMEDICARE®** beachten).

## 1. Zusammensetzung

Die Schutzhüllen **FLUXMEDICARE® Protect** sind aus Vliesstoff, mit einer Innenschutzfolie aus Polyäthylen PE/Polypropylen PP, 28 g/m<sup>2</sup>. Oeko-Tex® 100 Label.

## 2. Formate der Schutzhüllen

Es gibt die Schutzhüllen **FLUXMEDICARE® Protect** in verschiedenen Formaten, die für die verschiedenen Modelle der lichtemittierenden Textilien des Medizingeräts **FLUXMEDICARE®** geeignet sind.

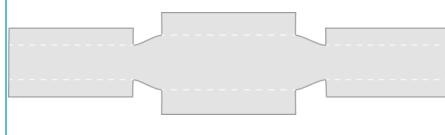Bezeichnung	Beschreibung	Foto TEXTLIGHT	Nutzung	FLUXMEDICARE® Protect*Cover
FMP01	Schutzhülle aus Vliesstoff für lichtemittierende Textilien TEXTLIGHT1 – Einzelgröße		Einmalige Benützung	
FMP02	Schutzhülle aus Vliesstoff für lichtemittierende Textilien TEXTLIGHT2 – Einzelgröße		Einmalige Benützung	
FMP03	Schutzhülle aus Vliesstoff für lichtemittierende Textilien TEXTLIGHT3 – Einzelgröße		Einmalige Benützung	
FMP04	Schutzhülle aus Vliesstoff für lichtemittierende Textilien TEXTLIGHT4 – Einzelgröße		Einmalige Benützung	
FMP06	Schutzhülle aus Vliesstoff für lichtemittierende Textilien TEXTLIGHT6 – Einzelgröße		Einmalige Benützung	

\* Abbildungen ohne Gewähr

### 3. Befestigung der Schutzhüllen für lichtemittierende FLUXMEDICARE® Textilien


#### 3.1. Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 1 für lichtemittierendes Textil T1

Die Schutzhülle **FLUXMEDICARE® Protect** – Best.-Nr. **FMP01** – wurde speziell für das lichtemittierende **FLUXMEDICARE® Textil Modell T1 (Textlight1)** entwickelt.

Lichtemittierende Textil Textlight1 (T1)



(Oberseite – Außenseite mit Klettverschlüssen)

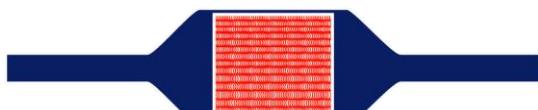


(Unterseite – Innenseite mit optischen Fasern)

Schutzhülle "FLUXMEDICARE® Protect" FMP01




Diagramm ohne Gewähr

SCHRITT 1: Mittelteil der Schutzhülle

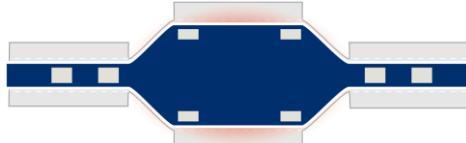


- 1) Die Schutzhülle flach auf eine flache Oberfläche legen, mit der glatten laminierten Seite nach außen.
- 2) Das lichtemittierende Textil (Modell Textlight 1) mit der dunkelblauen Gewebeseite mit den Klettverschlüssen nach außen auf der Schutzhülle anordnen. Das weiße Lichtband mit den optischen Fasern muss sich unten befinden, nicht sichtbar, in Kontakt mit der Schutzhülle.

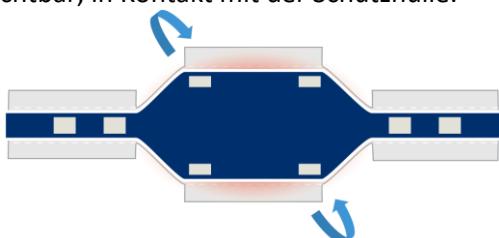

- 3) Die Laschen des Mittelteils der Schutzhülle um das Textil legen und durch Befestigung an den Klettverschlüssen der Textilien verschließen. Ggf. einstellen.

SCHRITT 2: seitliche Enden

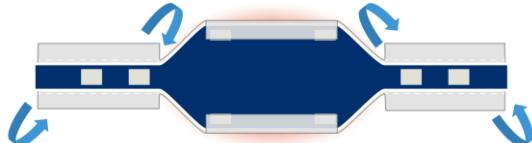

Die Laschen der Schutzhülle um jedes seitliche Ende des Textils legen und durch Befestigung an den Klettverschlüssen des Textils verschließen. Einstellen.

#### ABSCHLUSS DER BEFESTIGUNG



Das Textlight1 lichtemittierende Textil mit FLUXMEDICARE® Protect, Best.-Nr. FMP01, ist einsatzbereit.

(Siehe die Gebrauchsanweisung des Medizingeräts FLUXMEDICARE®.)

Die Schutzhülle ist für den Einmalgebrauch bestimmt und muss daher nach jeder Benützung entsorgt werden.


### 3.2. Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 2 für lichtemittierendes Textil T2

Die Schutzhülle **FLUXMEDICARE® Protect** – Best.-Nr. FMP02 – wurde speziell für das lichtemittierende **FLUXMEDICARE® Textil Modell T2 (Textlight2)** entwickelt.

Lichtemittierendes Textil Textlight2 (T2)



Schutzhülle „FLUXMEDICARE® Protect“ FMP02

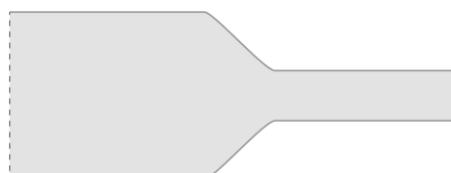

*Diagramm ohne Gewähr*

**SCHRITT 1: Aufziehen der Schutzhülle**



**ABSCHLUSS DER BEFESTIGUNG**



Das Textlight2 lichtemittierendes Textil mit **FLUXMEDICARE® Protect**, Best.-Nr. FMP02, ist einsatzbereit.

(Siehe die Gebrauchsanweisung des Medizingeräts **FLUXMEDICARE®**.)

Die Schutzhülle ist für den Einmalgebrauch bestimmt und muss daher nach jeder Benützung entsorgt werden.

### 3.3. Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 3 für lichtemittierendes Textil T3

Die Schutzhülle **FLUXMEDICARE® Protect** – Best.-Nr. FMP03 – wurde speziell für das lichtemittierende **FLUXMEDICARE® Textil Modell T3 (Textlight3)** entwickelt.

Lichtemittierendes Textil Textlight3 (T3)



Schutzhülle "FLUXMEDICARE® Protect" FMP03



Diagramm ohne Gewähr

**SCHRITT 1: Aufziehen der Schutzhülle**



**ABSCHLUSS DER BEFESTIGUNG**



Das Textlight3 lichtemittierende Textil mit **FLUXMEDICARE® Protect**, Best.-Nr. FMP03, ist einsatzbereit.

(Siehe die Gebrauchsanweisung des Medizingeräts **FLUXMEDICARE®**.)

Die Schutzhülle ist für den Einmalgebrauch bestimmt und muss daher nach jeder Benützung entsorgt werden.

### 3.4. Schutzhülle FLUXMEDICARE® Protect 4 und 6 für lichtemittierende Textilien T4 und T6

Die Schutzhülle **FLUXMEDICARE® Protect** – Best.-Nr. FMP04 – wurde speziell für das lichtemittierende **FLUXMEDICARE® Textil Modell T4 (Textlight4)** und die Schutzhülle **FLUXMEDICARE® Protect** – Best.-Nr. FMP06 – wurde speziell für das lichtemittierende **FLUXMEDICARE® Textil Modell T6 (Textlight6)** entwickelt.

Lichtemittierendes Textil Textlight4 (T4)



(Oberseite – Außenseite mit Klettverschlüssen)

Lichtemittierendes Textil Textlight6 (T6)



(Oberseite – Außenseite mit Klettverschlüssen)



(Unterseite – Innenseite mit optischen Fasern)

Schutzhülle  
“FLUXMEDICARE® Protect” FMP04 oder FMP06

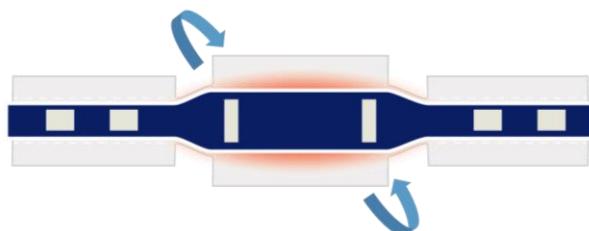


Diagramm ohne Gewähr

#### SCHRITT 1: Mittelteil der Schutzhülle




- 1) Die Schutzhülle flach auf eine flache Oberfläche legen, mit der glatten laminierten Seite nach außen.
- 2) Das lichtemittierende Textil (Modell Textlight4 oder Textlight6) mit der dunkelblauen Gewebeseite mit den Klettverschlüssen nach außen auf der Hülle anordnen. Das weiße Lichtband aus optischen Fasern muss sich unten befinden, nicht sichtbar, in Kontakt mit der Schutzhülle.



- 3) Die Laschen des Mittelteils der Schutzhülle um die Textilie legen und durch Befestigung an den Klettverschlüssen der Textilie verschließen. Ggf. einstellen.

#### SCHRITT 2: seitliche Enden

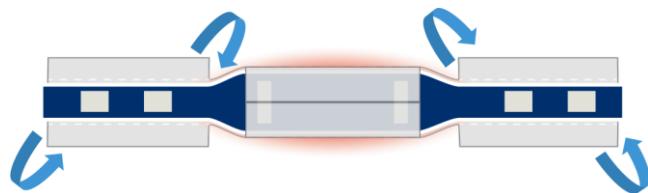

Die Laschen der Schutzhülle um jedes seitliche Ende der Textilie legen und durch Befestigung an den Klettverschlüssen der Textilie verschließen. Einstellen.

#### ABSCHLUSS DER BEFESTIGUNG



Das Textlight4 oder Textlight6 lichtemittierende Textil mit **FLUXMEDICARE® Protect**, Best.-Nr. FMP04 oder **FLUXMEDICARE® Protect**, Best.-Nr. FMP06, ist einsatzbereit.

(Siehe die Gebrauchsanweisung des Medizingeräts **FLUXMEDICARE®**.)

Die Schutzhülle ist für den Einmalgebrauch bestimmt und muss daher nach jeder Benutzung entsorgt werden.